

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Általános leírás

A shiatsu japán eredetű **terápiás masszáz**s a test bizonyos pontjaira való ujj-nyomás alkalmazásával megelőzi, illetve enyhíti a panaszok széles skáláját, mint például nyak-, váll-, hát-, derékfájás, izomgörcs, stressz, álmatlanság stb. A **hőterápia** oldja a fizikai fáradtság során felmerülő izommerevséget, enyhíti a krónikus mozgásszervi fájdalmat, javítja a vérkeringést.

A shiatsu nyakmasszírozó készülék shiatsu masszázst hőterápiával ötvözve szolgálja az Ön kényelmét, testi-lelki felfrissülését és ellazulását!

Termékjellemzők

- tradicionális ujj-nyomós masszáz 4 masszázsgörgővel
- a melegítő funkció fokozza a masszáz jótékony hatását
- szivargyújtóról autóban is működtethető

A csomag tartalma

- 1 db Vivamax shiatsu nyakmasszírozó
- 1 db védőhuzat
- 1 db adapter csatlakozó kábel
- 1 db adapter szivargyújtóhoz
- 1 db használati utasítás

Vigyázat!

Kérje ki orvosa véleményét, amennyiben:

- Ön várandós
- szívritmus-szabályzója van
- aggodalmi vannak az egészségi állapotát illetően

Biztonsági figyelmeztetés

- Soha ne hagyja az áram alá helyezett készüléket felügyelet nélkül! Amikor nem használja, mindig áramtalanítsa!
- Nem javasoljuk, hogy folyamatosan 15 percnél hosszabb ideig használja a készüléket.
- Ne használja, duzzadt, gyulladt testrészen, illetve ha bőrsérülései vannak!
- Gyermekek és mozgássérült személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják a készüléket!
- Kizárólag rendeltetésszerűen használja a terméket! A rendeltetésszerű használatától való eltérés a garancia elvesztését vonja maga után. Ne használjon a készülékhez olyan alkatrészeket, kiegészítőket, melyek nincsenek a csomagolásban! Ne próbálja önmaga megszerelni!
- Ha a kábel vagy a villásdugó sérülését érzékeli, ha a készülék vizes lesz, vagy vízbe esik, ne helyezze áram alá a készüléket! Forduljon a garancialevélen található szervizhez!
- A készüléket és a kábelt is tartsa távol meleg felületektől (radiátor, tűzhely, kályha)!
- Ne aludjon el a készülék használata közben!
- Ne használja, ha aeroszol gázok vannak a levegőben, vagy kevés az oxigén!
- Használat közben ne takarja le semmivel a készüléket, mert a motor túlmelegedhet, és ez tüzet okozhat!
- Soha ne a kábelénél fogva emelje fel, ne a kábelt használja fogantyúnak!
- Mielőtt áramtalanítja a készüléket, kapcsolja ki a masszáz és melegítő funkciókat.
- A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték, nem minősül orvostechnikai eszköznek.
- Ne használja szabadtéren!
- Gyenge vérkeringésű személyek számára nem ajánlott a készülék használata!
- Ne dobálja, ne ütögesse és óvja az éles tárgyaktól!
- Ha bármilyen egészségügyi panasza van, használat előtt kérje ki orvosa véleményét!
- Nem helyettesíthet használatával orvosi ellenőrzést!
- Nem professzionális eszköz, fáradt izmok nyugtatására, lazítására tervezték.

- Ha hőre érzékeny, használat előtt kérje ki orvosa véleményét!
- Szívritmus-szabályzóval rendelkező személyeknek nem ajánlott a készülék használata, ha mégis használni akarják, kérjék ki orvosuk véleményét.
- Egyszerre csak 15 percig használja, különben a motor túlmelegedhet! Néhány perc pihentetés után újra kezdheti a 15 perccel.
- Ne alkalmazza a készüléket orvosi kezelés helyett!
- Lefekvés előtt nem ajánlott a készüléket használni, ugyanis serkentheti a vérkeringést, ezáltal élénkíthet, nehezebbé téve az elalvást.

A készülék használata


1. Óvatosan csomagolja ki a készüléket! Ellenőrizze, hogy a csomag tartalma hiánytalan-e!

2. Helyezze a masszírozót a nyakára, úgy, hogy a két karját tegye be az erre kialakított tartóba (a mellékelt ábra szerint)! Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd a villásdugót az elektromos hálózathoz!


3. A masszázs aktiválásához, nyomja meg a **Masszázs BE/KI kapcsolót** a nyakmasszírozó oldalán található panelen. A gomb másodszori megnyomásával tudja leállítani a készüléket.

4. A masszázsfejek forgásirányának módosításához nyomja meg a **Forgásirányt módosító kapcsolót!** A fűtés bekapcsolásához nyomja meg a **Fűtés BE/KI kapcsolót**. A gomb másodszori megnyomásával kikapcsolhatja a fűtés funkciót. A fűtés bekapcsolását vörös fény jelzi.

5. Ha már nem használja a nyakmasszírozót kapcsolja ki a **Masszázs KI/BE kapcsoló** gombbal, majd áramtalanítsa!

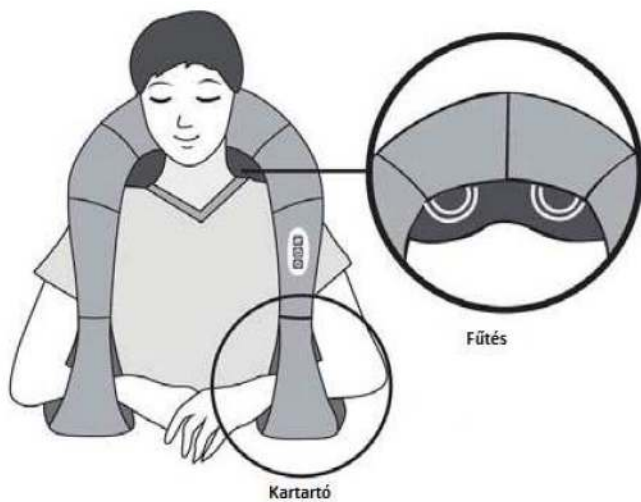

Kapcsolópanel

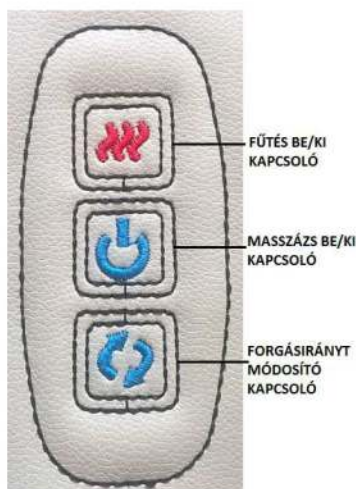

A Vivamax shiatsu nyakmasszírozó a masszázst hőterápiával ötvözi. Fokozza a vérkeringést, gyengéd, pezsdítő masszázst nyújtva Önnek.

Karbantartás

Tárolás és tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, majd áramtalanítsa az adapter kihúzásával!

A/ Tárolás

Amikor nem használja a készüléket, tegye vissza a dobozába, száraz, hűvös helyen tárolja! Tartsa távol éles tárgytól, melyek kiszakíthatják a készülék borítását. Ne tekerje a kábelt a készülék köré! Ne lógassa fel a készüléket a hálózati kábelnél fogva!

B/ Tisztítás

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg, míg a motor kihűl! (Ha a tisztítás előtt használta, akkor a kihűlés eltarthat néhány percig.) Kizárólag tiszta, puha, vagy maximum enyhén nedves ronggyal tisztítsa! Nagyon figyeljen arra, hogy ne érje víz vagy semmilyen más folyadék a készüléket!

- Ne merítse folyadékba a tisztításhoz!
- Tisztításhoz ne használjon oldószert, benzint, kerozint, festékdoldót, üvegtisztítót és erős szőrű kefé! Ezek mind tönkretelhetik a készülék felületét.
- Ne próbálja önmaga megszerelni, mert ez a garancia elvesztését vonja maga után!

Hibalehárítás

Ha a készülék nem megfelelően működik, az alábbi táblázat segítséget nyújthat a hiba felderítésében. Ha az alábbi táblázat egyik megoldási lehetősége sem vezet eredményre, akkor kérjük, forduljon a szakszervizhez!

Hibajelenség	Lehetséges okok	Megoldás
A készülék nem működik.	A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz. A csatlakozó nem megfelelően van csatlakoztatva. A készülék nincs bekapcsolva.	Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. Ellenőrizze a csatlakozót. Kapcsolja be a készüléket.
A készülék működés közben hirtelen megáll.	Túl sokáig használta a készüléket ezért a túlmelegedés elleni védelem bekapcsolt.	Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatból.
Túl erősen vagy túl gyengén masszíroz.	A készülék nem megfelelő szögben áll.	Állítsa a készüléket a megfelelő szögbe.
A készülék furcsa zajokat ad ki működés közben.	Valószínűleg a készülékben egy alkatrész meghibásodott.	Forduljon szakszervizhez.

Hulladékkezelés

A készülék nem dobható a háztartási hulladékok közé!

Kérjük lépjen kapcsolatba az lakóhelyén illetékes hatóságokkal a készülékre vonatkozó környezetvédelmi előírásokkal kapcsolatban (elektromos hulladék)!



A jelzés azt mutatja, hogy a készülék nem kerülhet a háztartási hulladékok közé Európában. Hogy megóvja a környezetre, és az emberi szervezetre történő káros hatástól, melyet az ellenőrizetlen tárolás hulladékkezelés okozhat, hasznosítsa felelősséggel, ezzel segítve az erőforrások hosszú távú újrahasznosítását! A már nem használható terméket kérjük, küldje vissza a vásárlás helyére, ők gondoskodnak az újrahasznosításról!

Műszaki adatok

Terméknév:	Vivamax nyakmasszírozó készülék
Termékkód:	GYVM23
Feszültség:	220-240V
Adapter kimeneti feszültség	12VDC 2A
Teljesítmény:	24W
Maximális hőmérséklet	60°C
Automatikus kikapcsolás	15 perc után